



ADVANCED PRONE BREAST PATIENT POSITIONING

POSITIONNEMENT EVOLUÉ DU SEIN DU PATIENT EN DÉCUBITUS VENTRAL

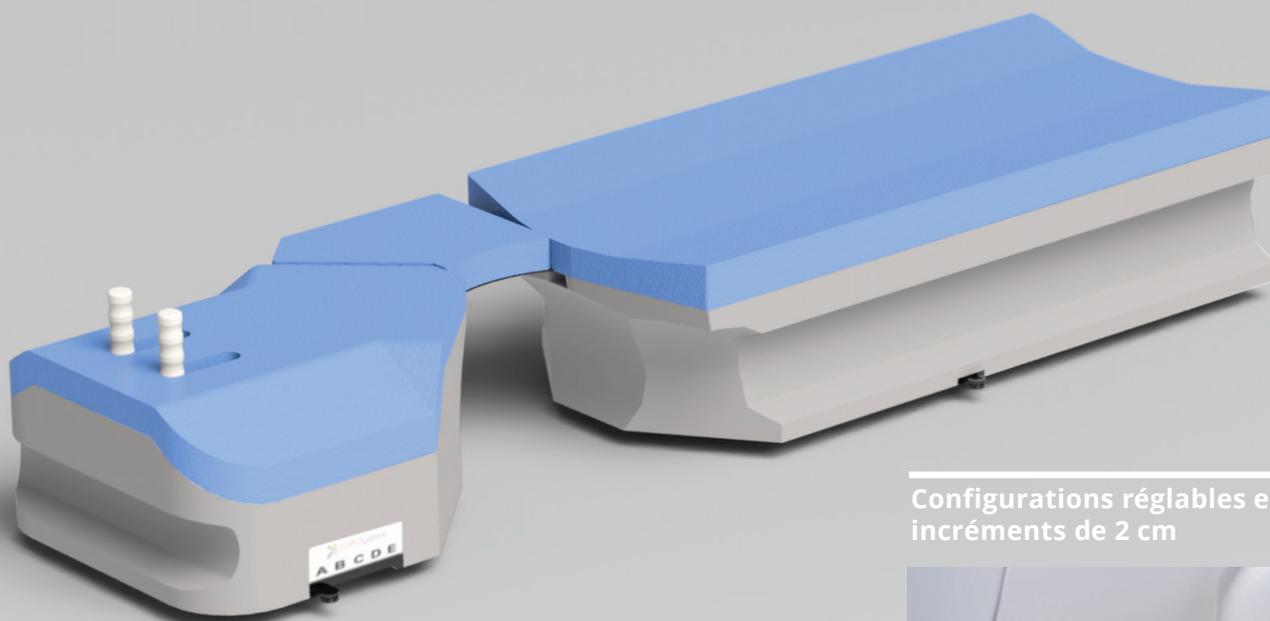

Configurations réglables en
incréments de 2 cm

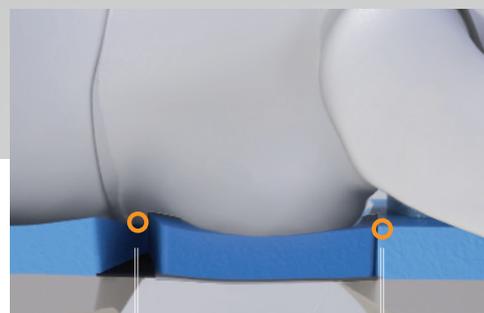

Configuration 18cm




Configuration 28cm

APERCU DU PRODUIT

Conçu pour un placement rapide et précis du sein des patients en décubitus ventral. Quand nécessaire, permet un décalage latéral du patient.

Les avantages de la technique du traitement du Sein en Décubitus Ventral sont bien documentés et comportent :


- Eloignement de la cavité de la tumorectomie de la paroi thoracique, cœur et poumon
- Réduction de la systole cardiaque et du mouvement respiratoire
- Rendu cosmétique accru avec réduction des douleurs et de la réaction de la peau
- Reproductibilité quotidienne optimisée

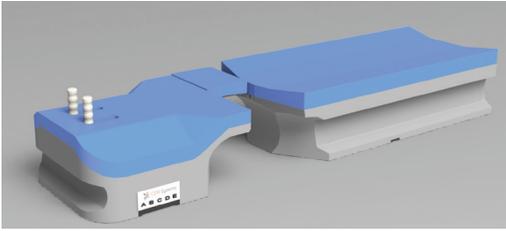

PB06

La hauteur standard avec l'ensemble des coussins lors du positionnement du sein du patient en décubitus ventral élève la paroi thoracique de 24 cm en haut du plateau. Cette conception apporte un maximum de soutien au patient. L'ouverture pour le traitement du sein est ajustable de 18 à 28 cm.


PB06-2cm: Code produit pour remplacer le lot de coussins standards par un lot de coussins fermes

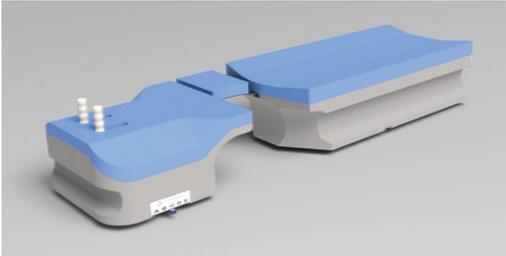

PB06-LP

Positionnement Evolué du sein du patient en Décubitus Ventral, profil bas, soulève la paroi thoracique de 17 cm en haut du plateau. Cette conception apporte un maximum de soutien au patient. L'ouverture pour le traitement du sein est ajustable de 18 à 28 cm.


PB06-LP-2cm: Code produit pour remplacer le lot de coussins standards par un lot de coussins fermes

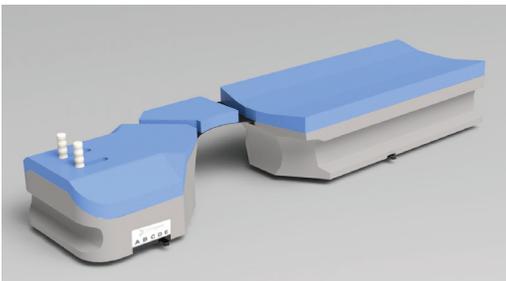

PB06-S

Positionnement Evolué du sein du Patient en Décubitus Ventral soulève la paroi thoracique de 24 cm en haut du plateau. Cette conception ouverte est conçue pour un accès Superclav et des traitements multi champs. L'ouverture pour le traitement du sein est ajustable de 18 à 28 cm.

PB06-S-2cm: Code produit pour remplacer le lot de coussins standards par un lot de coussins fermes

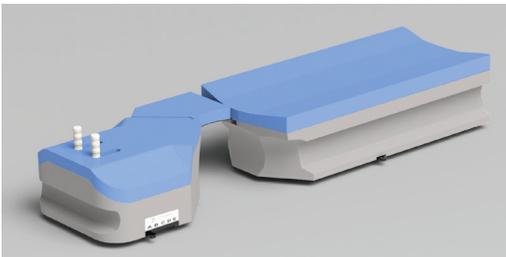

PB06-S-LP

Positionnement Evolué du sein du Patient en Décubitus Ventral, profil bas, soulève la paroi thoracique de 17 cm en haut du plateau. La conception ouverte est conçue pour un accès Superclav et des traitements multi champs. L'ouverture pour le traitement du sein est ajustable de 18 cm à 28 cm.

PB06-S-LP-2cm: Code produit pour remplacer le lot de coussins standards par un lot de coussins fermes


MR Pour une version compatible IRM de chacune de ces configurations, ajouter un « -K » au code produit.

La Tablette de support du sein controlatérale et le coussin sont interchangeables pour côté gauche ou droit.

Le Profil bas soulève le patient de 17 cm en haut du plateau pour accommoder les patients sur tous scanners y compris les scanners de petits diamètres.

La hauteur standard soulève le patient de 24 cm en haut du plateau, optimisé précisément pour les scanners de grands diamètres.

Barres d'indexation vendues séparément

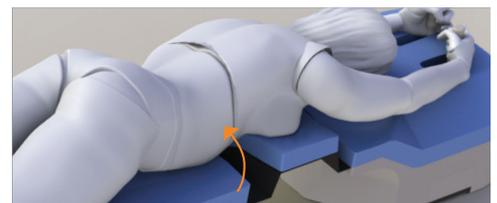

PF01

Support de Tête en Décubitus Ventral



PB06-WDG

Tablette de support du sein Controlatéral à angle de 10° compatible avec tous modèles PB06 et ajustable pour toute ouverture de 18 à 28 cm